


UA NEEDLE

鋭い先端に、
高密度の電流。

UA-S01e

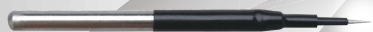

UA-S02e



UA-S03e



UA-S05e



UA-L01e




UA-L02e




円錐状の鋭利な先端形状によるメリット

- 超細径の先端故に高い電流密度効果があり、低いパワー設定で止血効果の高い切開が可能
- 金属メスのような線ではなく、点で自由曲線の切開が容易

切開

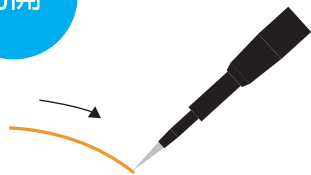

凝固

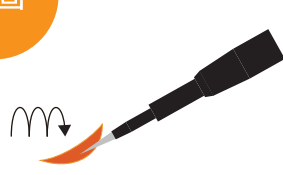

自由な
曲線



品 番	全 長	規 格	包 装
UA-S01e	44mm	ストレート	2本入/1P
UA-S02e	52mm	ストレート	2本入/1P
UA-S03e	52mm	アングル 3mm	2本入/1P

品 番	全 長	規 格	包 装
UA-S05e	53mm	アングル 9mm	2本入/1P
UA-L01e	122mm	アングル 3mm	2本入/1P
UA-L02e	137mm	アングル 3mm	2本入/1P

販売業者: グンゼメディカル株式会社

各種資料の請求・サンプル試用・購入その他のお問い合わせは、
グンゼメディカル株式会社までご連絡ください。

TEL: 06-4796-3151 / FAX: 06-4796-3150

製造販売業者: 株式会社NEXUS-Arc

販売名: UAニードル電極
認証番号: 228AIBZX00006A01
文書管理No. P000053-4 (2026.6)